

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 режима работы RL 430
- Частота пульсации – 1600 в мин.
- Уровень давления жидкости – 240–1040 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 85 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (920 mAh)
- Потребляемая мощность – 7,4 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Зарядка через кабель Type-C
- Время полной зарядки – 2,5 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 25 дней.
- Средний срок службы – 5 лет
- Размеры в сложенном состоянии – 50x33x125 мм
- Размеры в рабочем состоянии (без насадки) – 50x33x195 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

MINI PORTABLE ORAL IRRIGATOR

МИНИ ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся на корпусе прибора рядом с гнездом насадки.
- Если индикатор заряда мигает красным, значит ирригатор следует подзарядить.
- Во время зарядки индикатор заряда горит красным.
- Когда зарядка завершена, включается зеленая индикация.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



В базовой комплектации портативного ирригатора RL 430 2 стандартные сменные насадки.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

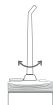

Вставьте насадку в гнездо и поверните ее по часовой стрелке до упора.

Чтобы снять насадку, поверните ее против часовой стрелки до упора и потяните вверх.

Насадку можно хранить в специальном отделении внутри корпуса: откройте клапан, расположенный рядом с гнездом насадки, и поместите насадку внутрь наконечником вверх. Закройте клапан.



НАЧАЛО РАБОТЫ



Потяните за верхнюю часть корпуса до щелчка.



Откройте крышку-зеркальце на 90° и наполните резервуар водой. Закройте крышку до щелчка.



Наполнять резервуар можно также через верх резервуара, отсоединив его от корпуса.



Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл, выбор режимов работы – с помощью кнопки управления.



Портативный ирригатор RL 430
позволяет использовать 3 режима работы:



Soft



Standart



DIY

Выбор уровня давления в режиме DIY

Выберите режим DIY. Нажмите и удерживайте кнопку Mode (индикатор DIY будет мигать, а уровень давления – увеличиваться). Отпустите кнопку, когда уровень давления будет вас устраивать.

Краткосрочное включение ирригатора

Чтобы в любом из режимов включить ирригатор на нужное вам время, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. На корпусе прибора одновременно загорятся индикаторы режима и заряда. Прибор будет работать, пока вы удерживаете кнопку включения.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер: ИП Обухинов М.А., г. Элиста, ул. Джангара, д. 7
Производитель: Dongguan Mingchuang Youshang Electronic Technology Co., Ltd. - 6th Floor, Building 5, Haiyong Science and Technology Park, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China/Китай | Сделано в Китае